

Transport og holdbarhet

Grunnkurs i dekontaminering

Eivind Espeland

Seksjonsleder

Avdeling for smittevern

OUS-Rikshospitalet

Internasjonale anbefalinger

Association for the Advancement of

- ANSI/AAMI

✕ Kollaps alle

🔍 Utvid alle

SN/TS 6609

Sterilt medisinsk utstyr i helsetjenesten-Krav til
lagring, håndtering og transport →

sterilizing reusable medical
equipment, and maintenance of associated
care facilities

Association of PeriOperative Registered Nurses

- AORN Standards & Recommended Practices, 2016

Transport

Risikovurdering:

- Sikkerhet for utstyret
- Sikkerhet for de som håndterer det
- Klima/temperatursvingninger
- Korrekt innpakking (ikke plastpose i baksetet)

Husk:

- Utstyret skal være helt avkjølt
- Låsbart skrin/transport.
- Isolerende innpakking for å unngå temperatursvingninger
- Måling av temperatur og luftfuktighet i kjøretøyet/pakken
- 3 pakkelaag – robust transportlag ytterst

Håndtering



- **Sterilt**

- Innpakket frem til bruk på pasient
- Må ikke utsettes for unødvendig håndtering
- Må beskyttes mot belastning og forurensing

- **Rent/desinfisert/sterilisert**

- Ikke innpakket
- Er ikke sterilt
- Må håndteres med forsiktighet
- Kan ikke brukes til invasive prosedyrer

Lagring

- Kontrollerte omgivelser
 - Luftfuktighet (35-75 %)
 - Temperatur (18-22 oC)
 - Beskyttet mot sollys
- Lukket skap/skuff eller eget rom
- Utstyret må være avkjølt før håndtering
- Sterilt utstyr holdes adskilt fra usterilt utstyr
- Sterilt utstyr må flyttes på og håndteres minst mulig



Kontrollrutiner
Registrering av målinger



Usterilt og sterilt utstyr
ligger side om side

Lagring-2

- Rom, skuffer, skap, traller osv. skal være synlig rene og støvfrie
- Unngå hull – ha god nok plass rundt utstyret, ikke sett tungt utstyr oppå annet utstyr
- Bær gods i bakke/kurv, ikke i lommen
- Unngå overbestilling av varer
- Holdbarheten er hendelsesrelatert, kontroller pakkene nøye før bruk
- FIFO!



Holdbarhet

- Bruk egnet tusj eller merkelapper til å markere holdbarheten, ikke bruk kulepenn – kan gi hull
- Skriv/ fest lappene på plastsiden av posene
- Sterilisert utstyr må merkes tydelig (kjemiske indikatorer)



Holdbarhet (tommelfingerregel)

Pakkemateriale	Tid
Papiremballasje	3-6 mnd.
Plast-papirpose	6-12 mnd.
Gjenbrukskonteiner	1-5 år




**HOLDBARHETEN ER AVHENGIG AV
HÅNTERING OG LAGRINGSFORHOLD**



UV-skap



Ultrafiolett stråling (UV-stråling)

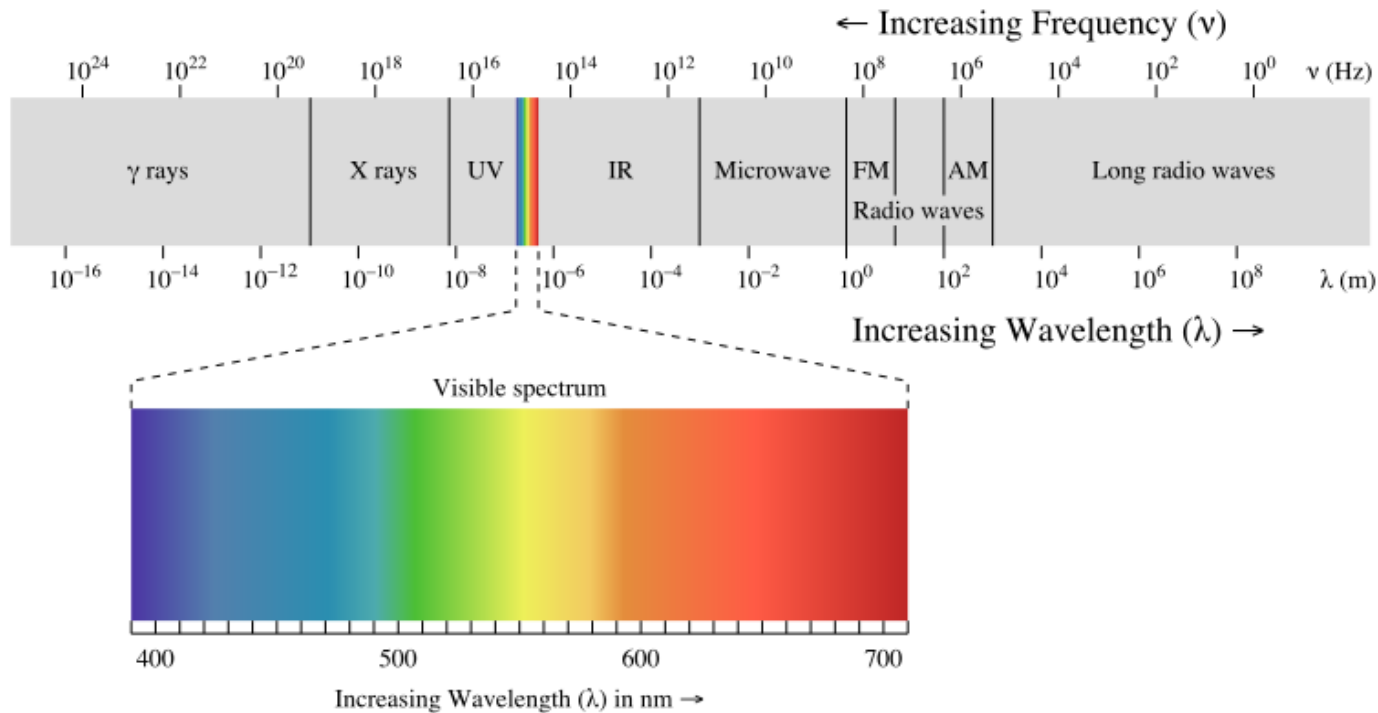

- Elektromagnetisk stråling
 - UV-A 315-400 nm
 - UV-B 280-315 nm
 - UV-C 100-280 nm
- Usynlig stråling, kan gjøre stor skade på mennesker
- UV-C: dreper bakterier ved å ødelegge DNA


Strålene er usynlig, men mange ser et blått lys. Det er fordi det er vanskelig å produsere ren stråling så «biproduktet» er lys med noe lengre bølgelengde, det vi oppfatter som blått lys

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EM_spectrum.svg

Bruk av UV-skap til oppbevaring av sterilt utstyr

- **Det er ikke noe vi anbefaler**

- Strålene treffer kun én flate, resten vil ikke bli påvirket
- Uinnpakket utstyr blir usterilt med en gang det tas ut av sterilisatoren
- Prosessen kan ikke valideres
 - Effekten av lysrørene avtar over tid, hvordan kontrolleres dette?
- Forskningen det vises til er gammel og ikke utført godt nok

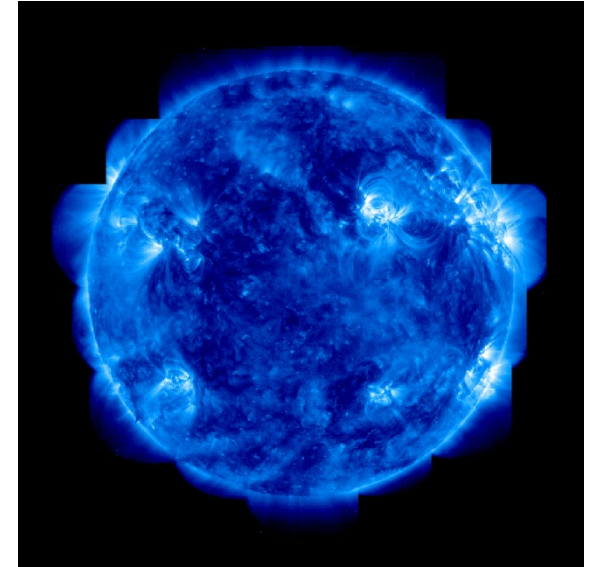

pixabay

Krav til utstyr som skal være sterilt

Utstyr som skal brukes til invasive prosedyrer/inngrep må pakkes i egnet steriliseringsemballasje produsert i henhold til NS-EN ISO 11607-1:2019 (Emballasje for sluttsterilisert medisinsk utstyr - Del 1: Krav til materialer, sterile barriersystemer og emballasjesystemer) og oppbevares i kontrollerte forhold.

Bruk av UV-skap til oppbevaring av **sterilisert** utstyr (trenger ikke være sterilt ved bruk)

Anbefales heller ikke

- Hver gang skapet åpnes, blir utstyret forurensset
- Hvordan sjekker man om utstyret er rent «nok»?
- Hvordan kontrollerer man effekten av lyset?
- Hvor lenge må utstyret ligge inne for å bli «rent nok»?
- Falsk trygghet
- Hvordan holder man styr på hvilket utstyr som har ligget lenge nok, hvor ofte skapet har blitt åpnet, hvem som har tatt noe ut, om noen har lagt noe tilbake, om døren er ordentlig lukket, etc.

Oppsummering

- All transport av rent/sterilt utstyr må risikovurderes
- Håndter rent/sterilt utstyr med forsiktighet
- Rent/sterilt utstyr skal oppbevares i kontrollerte omgivelser
- Holdbarheten er i hovedsak hendelsesrelatert
- Bruk av UV-skap anbefales ikke

