

Rev.	Ändring och/eller medd.-nr	Sign.	Datum
1	Beteckningar omställda efter C2. Teknisk beskrivelse	HA	2023-09-22
2	Bet. 2A samt 2B har utgått efter mail 2023-11-16	HA	2023-11-16
3	Bet.6 ändrad från polbult till jordpotentialuttag, samt bet.3A & 4A utgått	HA	2023-11-28

BETECKNINGSFÖRKLARING


1. Kopplingsutrymme Starkström
 - 1A. Utrymme med Jordpotentialplint fabr. Eldon typ PEOI12 med 12ansl. 16mm
 - 1B. Kopplingsutrymme Gas
3. Vägguttag 1-vägs med indikering Schneider Exxact, vit RAL 9003, KURS 1 (3)
4. Vägguttag 1-vägs med indikering Schneider Exxact, vit RAL 9003, KURS 2 (4)
5. ~~Undersökningsarmatur HALUX NEO-1 R-FX, 4400K, 1,8M CABLE WITH PLUG~~, Montage på skena
6. 1st Jordpotentialuttag, Busch&Jaeger i täcklock Fag/Elko RAL9003
7. Tomdosa för framtida uttag, utan blindlock, Fag/ Elko RS-16, Vit ram RAL9003 G30 (DATA)
8. Tomdosa för framtida uttag, utan blindlock, Fag/ Elko RS-16, Vit ram RAL9003 G30 (BUSSE)
- 9A. Plats (montageram) för patientsignal (RAL9003 GL30), horisontellt montage
- 9B. Plats (montageram) för patientsignal (RAL9003 GL30), vertikalt montage
10. Tomdosa för framtida uttag, Fag/ Elko RS-16, Vit ram RAL9003 G30
11. Gasuttag Andningsoxygen QMT MK2 40mm frigöringsplatta
12. Gasuttag Andningsluft QMT MK2 40mm frigöringsplatta
13. Gavel Färg RAL 9003 glans 30
14. Gavel med hål för anslutning färg RAL-9003 glans 30
15. Gavel med dräneringshål RAL 9003
16. Anslutning matningskanal Fagerhult 17445 (160x53mm)

Lampe uavklart
Skal ikke bestilles nå

SIGN. Ha	SKALA 1:20	Sykeromskanal Aluflex 9 Best.nr: 18580, Vit RAL9010	FAGERHULT Fagerhults Belysning AB Tel: +46 36 108500 566 80 Håbo Sweden WWW.FAGERHULT.COM epost: HCpriceandorder@fagerhult.se
RIT.DATUM 2022-05-22	ERSÄTTER		
PLOTT.DATUM 2023-11-28	ERSÄTT AV	Rikshospitalet	2023067/1
GENERELL TOLERANS		Oslo	


Rev.	Ändring och/eller medd.-nr	Sign.	Datum
1	Reviderad efter C2. Teknisk beskrivelse	HA	2023-09-22
2	Ändrad bestyckning enligt mail 2023-11-16	HA	2023-11-16
3	Ändrad längd tidigare 1800mm	HA	2023-11-28

4 st Typ 1VG2 L=2000mm (inkl.gavlar) RUM Övervakning grupp 2 rum

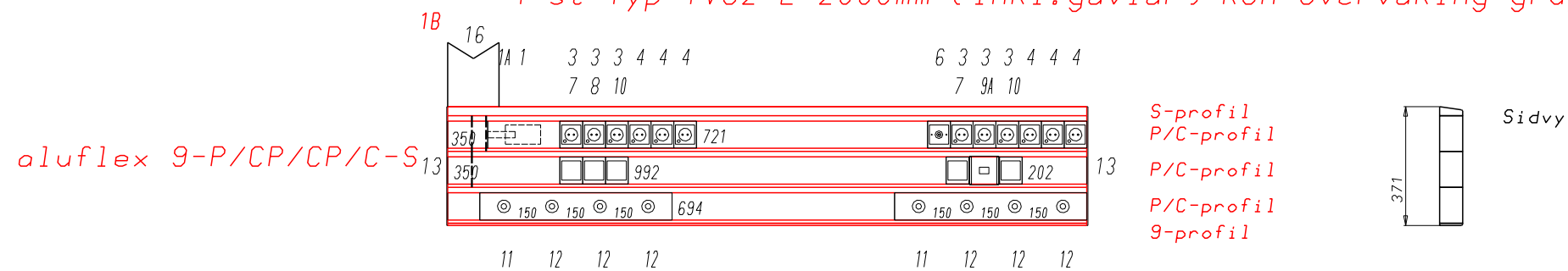

4 st Typ IV1VG2 L=2000mm

IV-skena Typ 18566

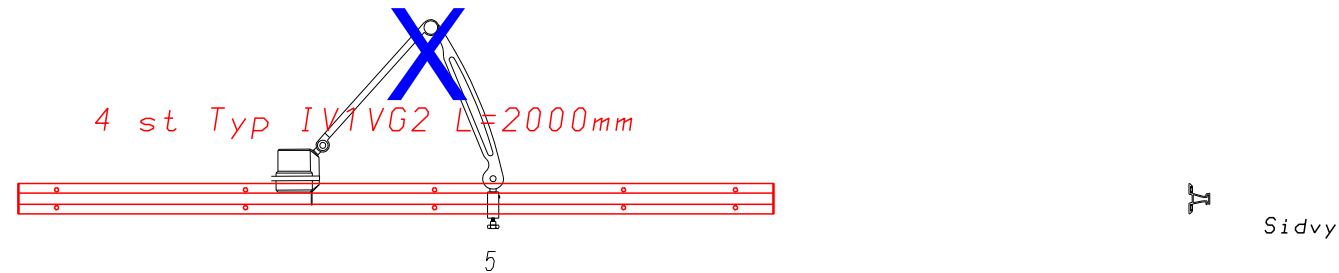

Matningskanal L=1400mm

Gasanslutning

Oxygen \varnothing 12mm kopparrör R90 avslutas 300mm utanför panel

A-Luft \varnothing 15mm kopparrör R90 avslutas 300mm utanför panel

Elanslutning

Kurs-1 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm

Kurs-2 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm

Ljussignal Kablage dras i egen kanal

Datauttag Kablage dras i egen kanal

KNX ansl. Kablage dras i egen kanal

Tomdosa Kablage dras i egen kanal

Härmed bekräftas att ritningen överensstämmer med beställningen



Datum : Sign. :

Den här handlingen får ej kopieras, delgivas, annan eller obehörigen användas. Överträdelse beivras


SIGN. Ha	SKALA 1:20	Sykeromskanal Aluflex 9 Best.nr: 18580, Vit RAL9003	FAGERHULT Fagerhults Belysning AB Tel: +46 36 108500 566 80 Hobo Sweden WWW.FAGERHULT.COM epost: HCpriceandorder@fagerhult.se
RIT.DATUM 2023-06-15	ERSÄTTER		
PLOTT.DATUM 2023-11-28	ERSÄTT AV	Rikshospitalet	2023067/2
GENERELL TOLERANS		Oslo	

Rev.	Ändring och/eller medd.-nr	Sign.	Datum
1	Reviderad efter C2. Teknisk beskrivelse	HA	2023-09-22
2	Ändrad bestyckning enligt mail 2023-11-16	HA	2023-11-16
3	Ändrat antal tidigare 4 styck, ändrad längd tidigare 1800mm	HA	2023-11-28

3 st Typ 1HG2 L=2000mm (inkl.gavlar) RUM Övervakning, grupp 2 rum

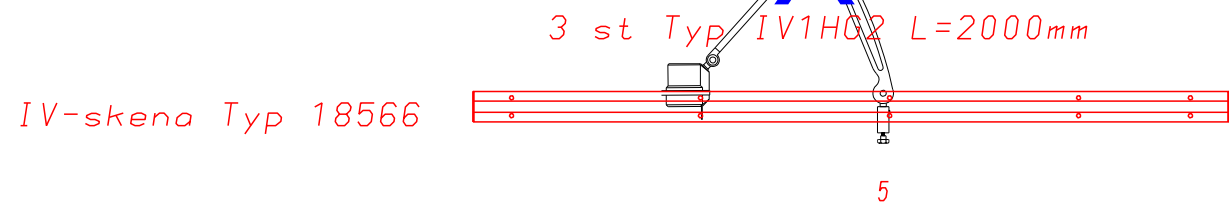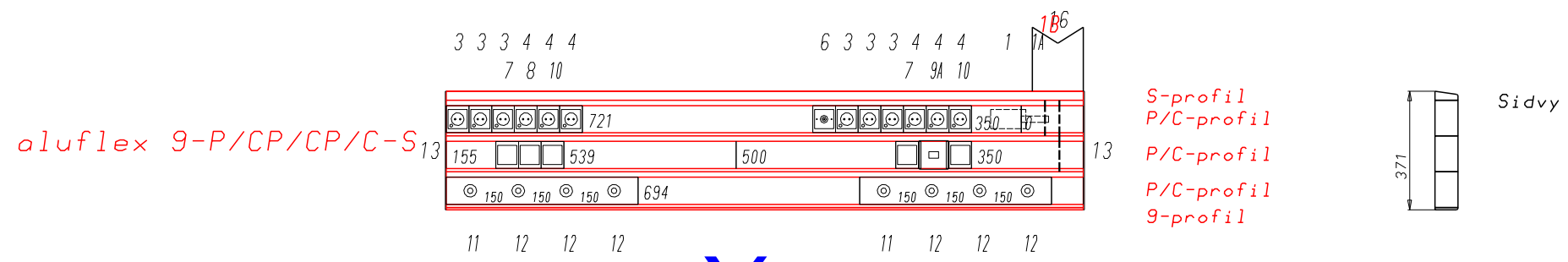

Matningskanal L=1400mm

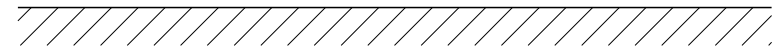


- Gasanslutning
- Oxygen \varnothing 12mm kopparrör R90 avslutas 300mm utanför panel
 - A-Luft \varnothing 15mm kopparrör R90 avslutas 300mm utanför panel
- Elanslutning
- Kurs-1 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
 - Kurs-2 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
 - Ljussignal Kablage dras i egen kanal
 - Datauttag Kablage dras i egen kanal
 - KNX ansl. Kablage dras i egen kanal
 - Tomdosa Kablage dras i egen kanal

Den här handlingen får ej kopieras, delgivas, annan eller obehörigen användas. Överträdelse beivras

SIGN. Ha	SKALA 1:20	Sykeromskanal Aluflex 9 Best.nr: 18580, Vit RAL9003	FAGERHULT Fagerhults Belysning AB Tel: +46 36 108500 566 80 Håbo Sweden WWW.FAGERHULT.COM epost: HCpriceandorder@fagerhult.se
RIT.DATUM 2023-06-15	ERSÄTTER		
PLOTT.DATUM 2023-11-28	ERSÄTT AV	Rikshospitalet	2023067/3
GENERELL TOLERANS		Oslo	

Rev.	Ändring och/eller medd.-nr	Sign.	Dotum
1	Reviderad efter C2. Teknisk beskrivelse	HA	2023-09-22
2	Ändrad bestyckning efter mail 2023-11-16	HA	2023-11-16
3	Ändrad uttagsplacering	HA	2023-11-28

4 st Typ 2HG2 L=4200mm (inkl.gavlar) RUM Övervakning grupp 2 rum

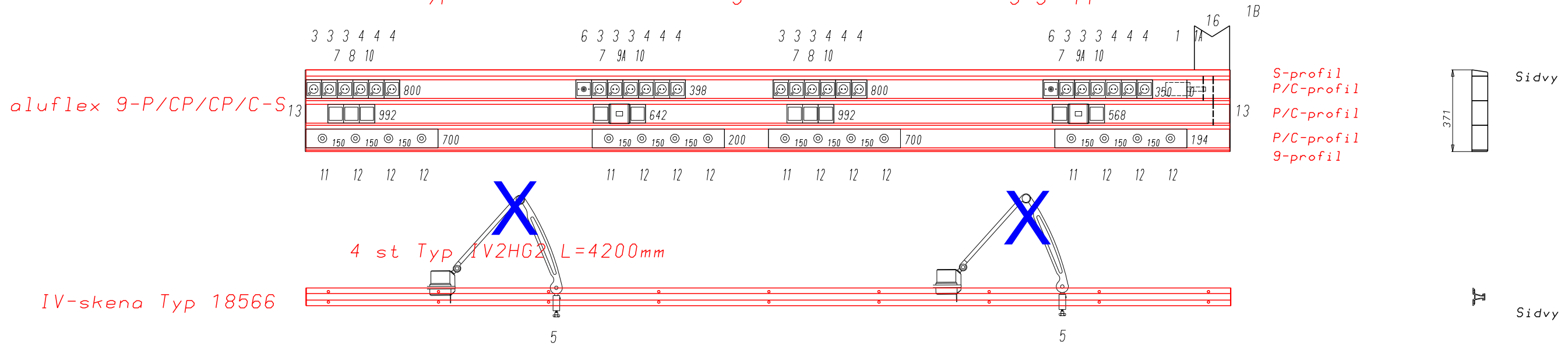

aluflex 9-P/CP/CP/C-S

4 st Typ IV2HG2 L=4200mm

IV-skene Typ 18566

Matningskanal L=1400mm

Gasanslutning
 Oxygen ∅ 12mm kopparrör R90 avslutas 300mm utanför panel
 A-Luft ∅ 18mm kopparrör R90 avslutas 300mm utanför panel


Elanslutning
 Kurs-1 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
 Kurs-2 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
 Kurs-3 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
 Kurs-4 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
 Ljussignal Kablage dras i egen kanal
 Datauttag Kablage dras i egen kanal
 KNX ansl. Kablage dras i egen kanal
 Tomdosa Kablage dras i egen kanal

Den här handlingen får ej kopieras, delgivas, annan eller obehörigen användas. Överträdelse beivras

SIGN. Ha	SKALA 1:20	Sykeromskanal Aluflex 9 Best.nr: 18580, Vit RAL9003	FAGERHULT Fagerhults Belysning AB Tel: +46 36 108500 566 80 Hobo Sweden WWW.FAGERHULT.COM epost: HCpriceandorder@fagerhult.se
RIT.DATUM 2023-06-15	ERSÄTTER		
PLOTT.DATUM 2023-11-28	ERSÄTT AV	Rikshospitalet	2023067/4
GENERELL TOLERANS		Oslo	

Rev.	Ändring och/eller medd.-nr	Sign.	Dotum
1	Reviderad efter C2. Teknisk beskrivelse	HA	2023-09-22
2	Ändrad bestyckning efter mail 2023-11-16	HA	2023-11-16
3	Ändrad uttagsplacering	HA	2023-11-28

4 st Typ 2VG2 L=4200mm (inkl.gavlar) RUM Övervakning grupp 2 rum

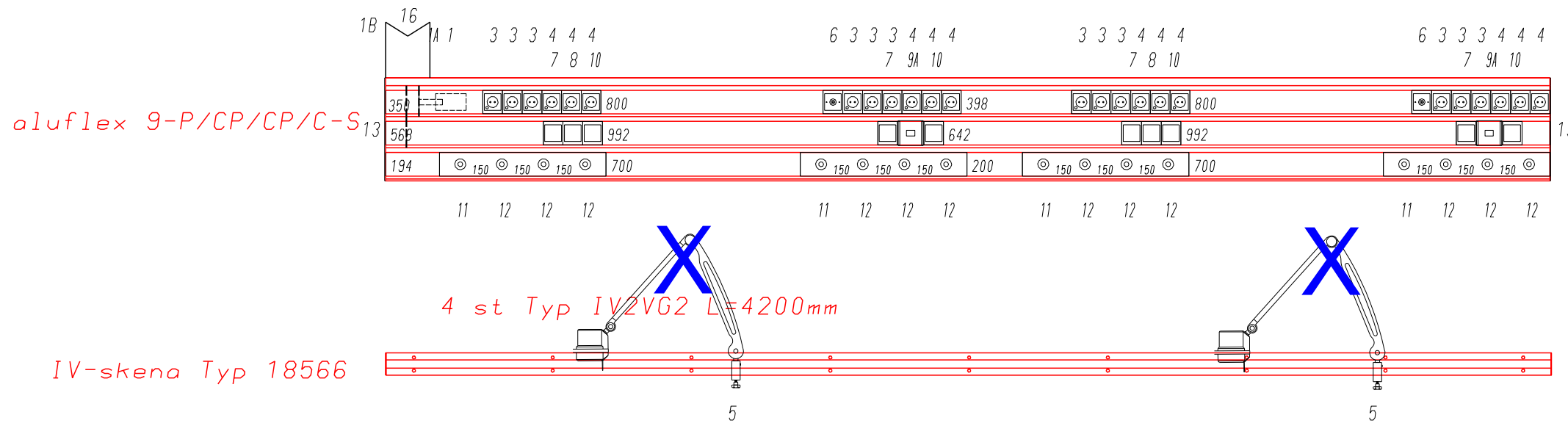

Matningskanal L=1400mm

Gasanslutning

- Oxygen \varnothing 12mm kopparrör R90 avslutas 300mm utanför panel
- A-Luft \varnothing 18mm kopparrör R90 avslutas 300mm utanför panel

Elanslutning

- Kurs-1 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
- Kurs-2 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
- Kurs-3 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
- Kurs-4 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
- Ljussignal Kablage dras i egen kanal
- Datauttag Kablage dras i egen kanal
- KNX ansl. Kablage dras i egen kanal
- Tomdosa Kablage dras i egen kanal

SIGN.	SKALA
Ha	1:20
RIT.DATUM	ERSÄTTER
2023-06-15	
PLOTT.DATUM	ERSÄTT AV
2023-11-28	
GENERELL TOLERANS	

Sykeromskanal Aluflex 9
 Best.nr: 18580, Vit RAL9003
 Rikshospitalet
 Oslo



FAGERHULT
 Fagerhults Belysning AB Tel: +46 36 108500
 566 80 Hobo Sweden WWW.FAGERHULT.COM
 epost: HCpriceandorder@fagerhult.se

2023067/5

Denna handling får ej kopieras, delgivas
 annan eller obehörigen användas.
 Övertäckelse beivras

Rev.	Ändring och/eller medd.-nr	Sign.	Datum
1	Reviderad efter C2. Teknisk beskrivelse	HA	2023-09-22
2	Ändrad bestyckning efter mail 2023-11-16	HA	2023-11-16
3	Ändrat antal tidigare 8 styck, samt ändrad längd tidigare 2500mm	HA	2023-11-28

4 st Typ 3G2a L=2600mm (inkl.gavlar) RUM Övervakning grupp 2 rum

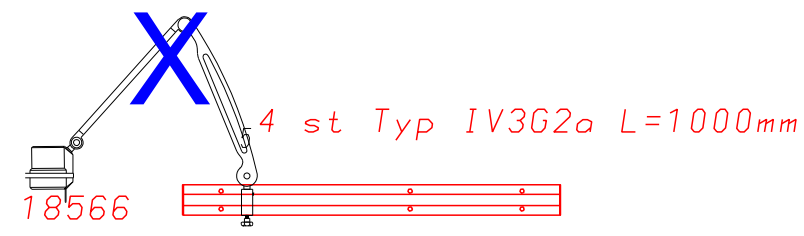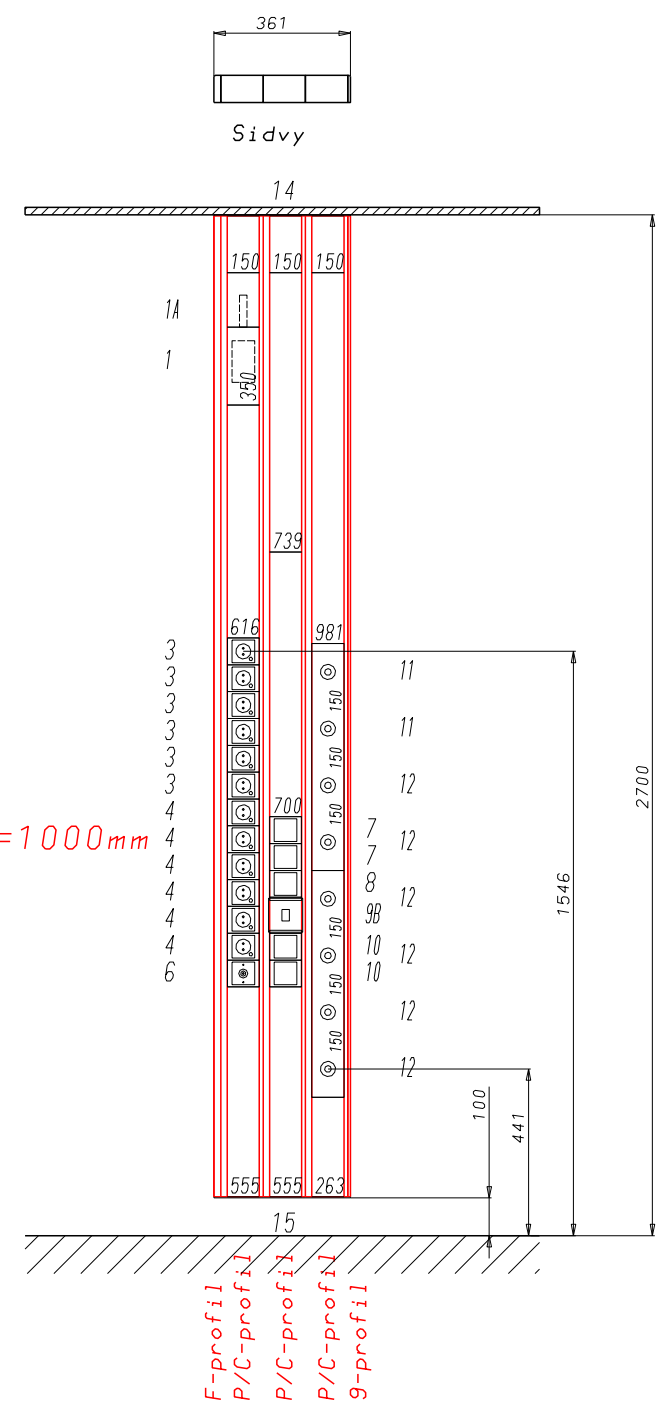

IV-skena Typ 18566

Gasanslutning
 Oxygen ø 12mm kopparrör R90 avslutas 300mm utanför panel
 A-Luft ø 15mm kopparrör R90 avslutas 300mm utanför panel

Elanslutning
 Kurs-1 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
 Kurs-2 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
 Ljussignal Kablage i egen kanal
 Datauttag Kablage i egen kanal
 KNX ansl. Kablage i egen kanal
 Tomdosa Kablage i egen kanal

Härmed bekräftas att ritningen överensstämmer med beställningen
 Datum : Sign. :



Den här handlingen får ej kopieras, delgivas, annan eller obehörigen användas. Överträdelse beivras

SIGN. Ha	SKALA 1:20
RIT.DATUM 2023-06-15	ERSÄTTER
PLOTT.DATUM 2023-11-28	ERSÄTT AV
GENERELL TOLERANS	

Sykeromskanal Aluflex 9
Best.nr: 18580, Vit RAL9003
Rikshospitalet
Oslo

FAGERHULT
 Fagerhults Belysning AB Tel: +46 36 108500
 566 80 Hobo Sweden WWW.FAGERHULT.COM
 epost: HCpriceandorder@fagerhult.se
2023067/6

4 st Typ 3G2b L=2750mm (inkl.gavlar) RUM Övervakning grupp 2 rum

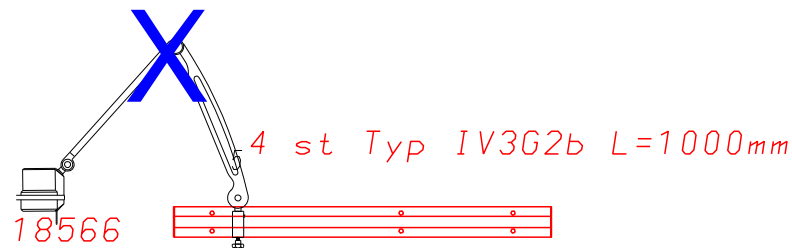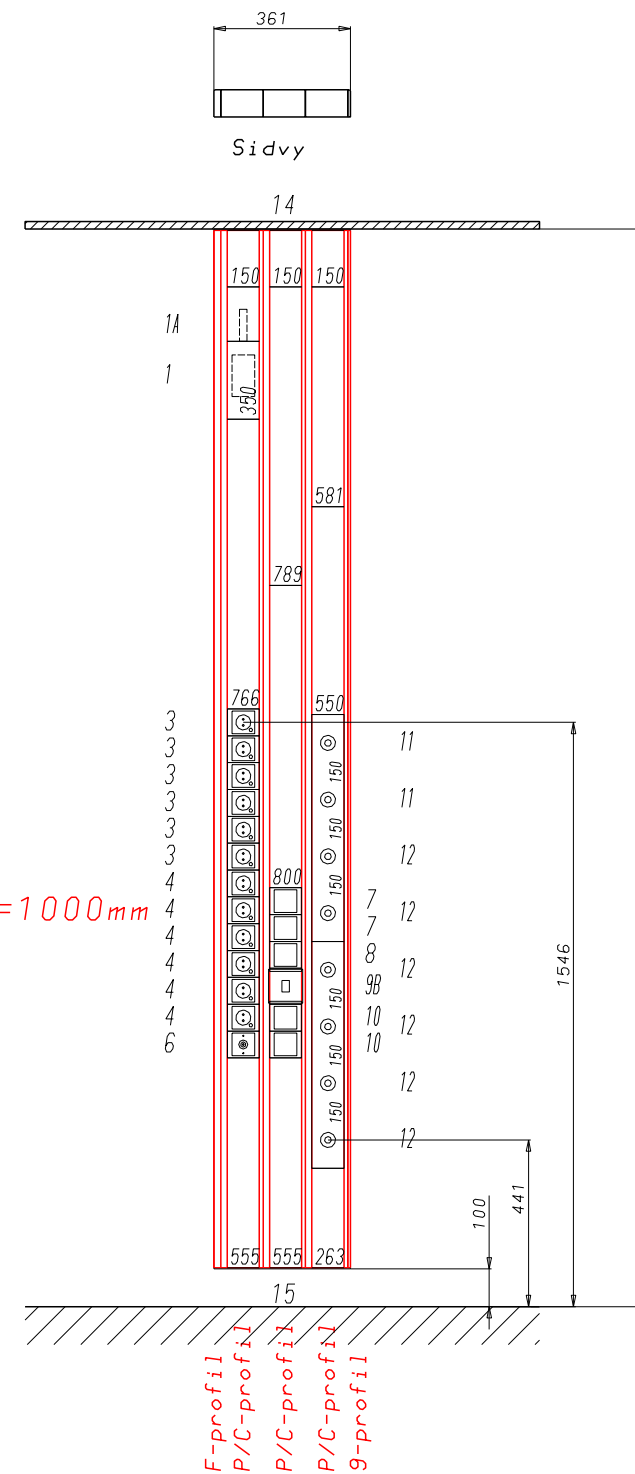

IV-skena Typ 18566

Gasanslutning

Oxygen \varnothing 12mm kopparrör R90 avslutas 300mm utanför panel
 A-Luft \varnothing 15mm kopparrör R90 avslutas 300mm utanför panel

Elanslutning

Kurs-1 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
 Kurs-2 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
 Ljussignal Kablage i egen kanal
 Datauttag Kablage i egen kanal
 KNX ansl. Kablage i egen kanal
 Tomdosa Kablage i egen kanal

aluflex 9-P/CP/CP/C-F

Härmed bekräftas att ritningen överensstämmer med beställningen
 Datum : Sign. :

Den här handlingen får ej kopieras, delgivas, annan eller obehörigen användas. Överträdelse beivras



SIGN. Ha	SKALA 1:20
RIT.DATUM 2023-06-15	ERSÄTTER
PLOTT.DATUM 2023-11-28	ERSÄTT AV
GENERELL TOLERANS	

Sykeromskanal Aluflex 9
Best.nr: 18580, Vit RAL9003
Rikshospitalet
Oslo

FAGERHULT
 Fagerhults Belysning AB Tel: +46 36 108500
 566 80 Håbo Sweden WWW.FAGERHULT.COM
 epost: HCpriceandorder@fagerhult.se

2023067/6A

Rev.	Ändring och/eller medd.-nr	Sign.	Datum
1	Ändrad bestyckning enligt mail 2023-11-16	HA	2023-11-16
2	Ändrat antal tidigare 4 styck, samt ändrad längd tidigare 1800mm	HA	2023-11-28

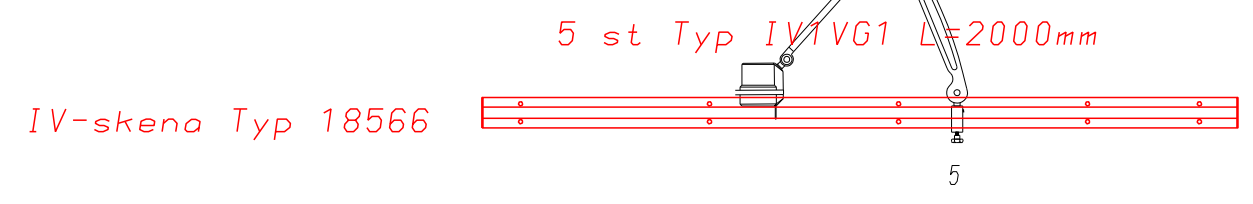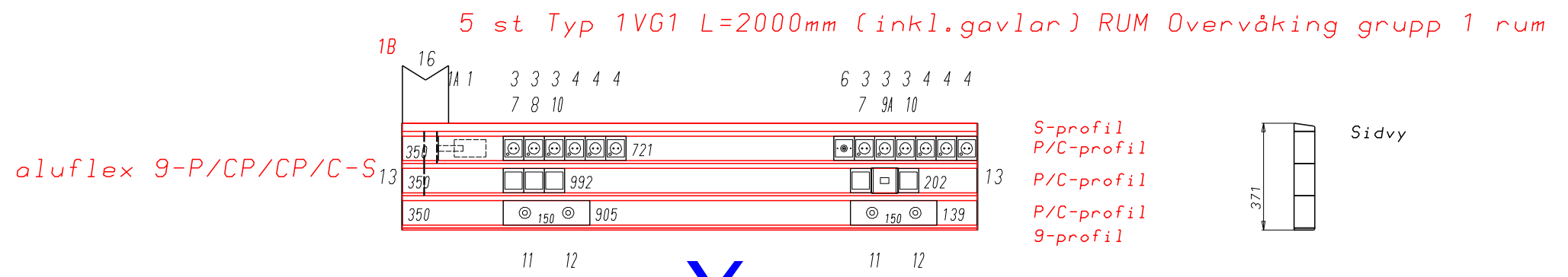

Gasanslutning
 Oxygen ∅ 12mm kopparrör R90 avslutas 300mm utanför panel
 A-Luft ∅ 12mm kopparrör R90 avslutas 300mm utanför panel

Elanslutning
 Kurs-1 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
 Kurs-2 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
 Ljussignal Kablage dras i egen kanal
 Datauttag Kablage dras i egen kanal
 KNX ansl. Kablage dras i egen kanal
 Tomdosa Kablage dras i egen kanal

Härmed bekräftas att ritningen överensstämmer med beställningen


Datum : Sign. :

Den här handlingen får ej kopieras, delgivas, annan eller obehörigen användas. Överträdelse beivras

SIGN. HA	SKALA 1:20	Sykeromskanal Aluflex 9 Best.nr: 18580, Vit RAL9003	FAGERHULT Fagerhults Belysning AB Tel: +46 36 108500 566 80 Hobo Sweden WWW.FAGERHULT.COM epost: HCpriceandorder@fagerhult.se
RIT.DATUM 2023-09-22	ERSÄTTER		
PLOTT.DATUM 2023-11-28	ERSÄTT AV	Rikshospitalet	2023067/7
GENERELL TOLERANS		Oslo	


Rev.	Ändring och/eller medd.-nr	Sign.	Dotum
1	Ändrad bestyckning enligt mail 2023-11-16	HA	2023-11-16
2	Ändrat antal tidigare 4 styck, samt ändrad längd tidigare 1800mm	HA	2023-11-28

3 st Typ 1HG1 L=2000mm (inkl.gavlar) RUM Övervakning, grupp 1 rum

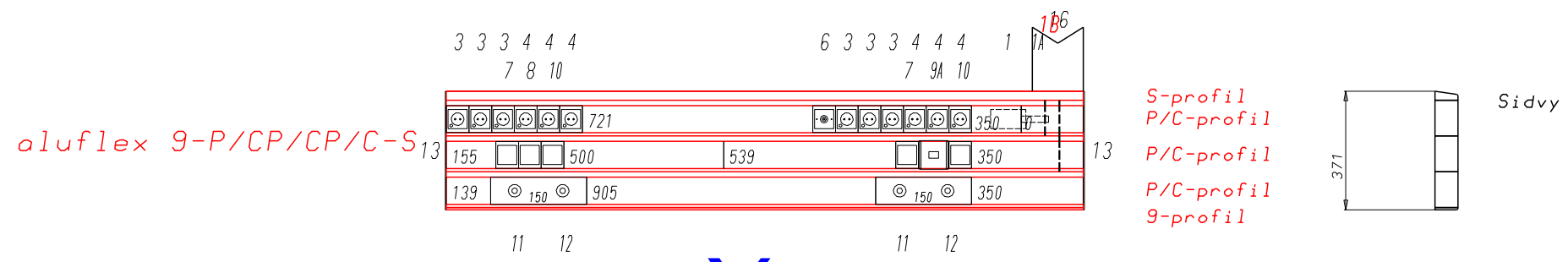


3 st Typ IV1HG1 L=2000mm

IV-skena Typ 18566

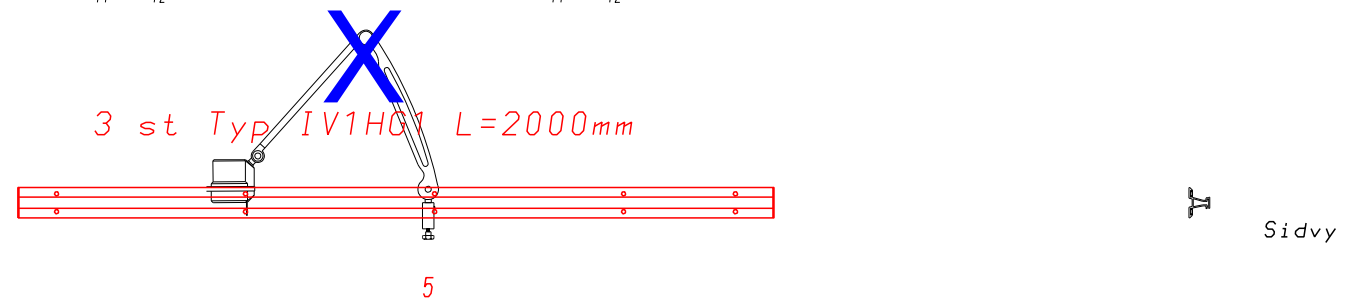

Matningskanal L=1400mm

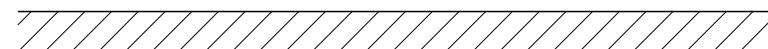

Gasanslutning

- Oxygen \varnothing 12mm kopparrör R90 avslutas 300mm utanför panel
- A-Luft \varnothing 12mm kopparrör R90 avslutas 300mm utanför panel

Elanslutning


- Kurs-1 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
- Kurs-2 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
- Ljussignal Kablage dras i egen kanal
- Datauttag Kablage dras i egen kanal
- KNX ansl. Kablage dras i egen kanal
- Tomdosa Kablage dras i egen kanal

Den här handlingen får ej kopieras, delgivas, annan eller obehörigen användas. Överträdelse beivras

SIGN. HA	SKALA 1:20	Sykeromskanal Aluflex 9 Best.nr: 18580, Vit RAL9003	FAGERHULT Fagerhults Belysning AB Tel: +46 36 108500 566 80 Håbo Sweden WWW.FAGERHULT.COM epost: HCpriceandorder@fagerhult.se
RIT.DATUM 2023-09-22	ERSÄTTER		
PLOTT.DATUM 2023-11-28	ERSÄTT AV	Rikshospitalet	2023067/8
GENERELL TOLERANS		Oslo	

Rev.	Ändring och/eller medd.-nr	Sign.	Dotum
1	Ändrad bestyckning enligt mail 2023-11-16	HA	2023-11-16
2	Ändrad uttagsplacering	HA	2023-11-28

4 st Typ 2HG1 L=4200mm (inkl.gavlar) RUM Övervakning grupp 1 rum

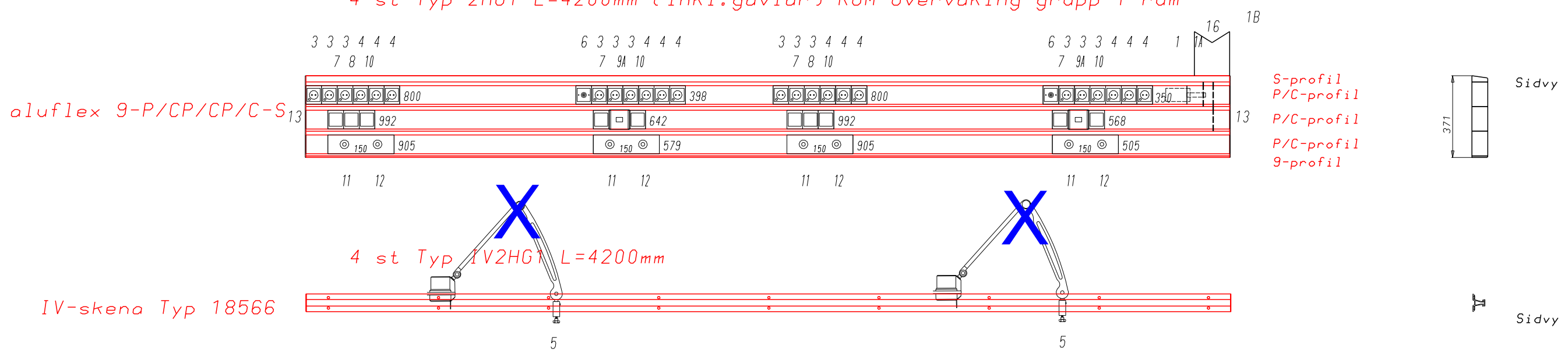

Matningskanal L=1400mm

Gasanslutning
 Oxygen ∅ 12mm kopparrör R90 avslutas 300mm utanför panel
 A-Luft ∅ 12mm kopparrör R90 avslutas 300mm utanför panel


Elanslutning
 Kurs-1 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
 Kurs-2 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
 Kurs-3 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
 Kurs-4 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
 Ljussignal Kablage dras i egen kanal
 Datauttag Kablage dras i egen kanal
 KNX ansl. Kablage dras i egen kanal
 Tomdosa Kablage dras i egen kanal

Den här handlingen får ej kopieras, delgivas, annan eller obehörigen användas. Överträdelse beivras

SIGN. HA	SKALA 1:20	Sykeromskanal Aluflex 9 Best.nr: 18580, Vit RAL9003	FAGERHULT Fagerhults Belysning AB Tel: +46 36 108500 566 80 Hobo Sweden WWW.FAGERHULT.COM epost: HCpriceandorder@fagerhult.se
RIT.DATUM 2023-09-22	ERSÄTTER		
PLOTT.DATUM 2023-11-28	ERSÄTT AV	Rikshospitalet	2023067/9
GENERELL TOLERANS		Oslo	

Rev.	Ändring och/eller medd.-nr	Sign.	Dotum
1	Ändrad bestyckning efter mail 2023-11-16	HA	2023-11-16
2	Ändrad uttagsplacering	HA	2023-11-28

4 st Typ 2VG1 L=4200mm (inkl.gavlar) RUM Övervakning grupp 1 rum

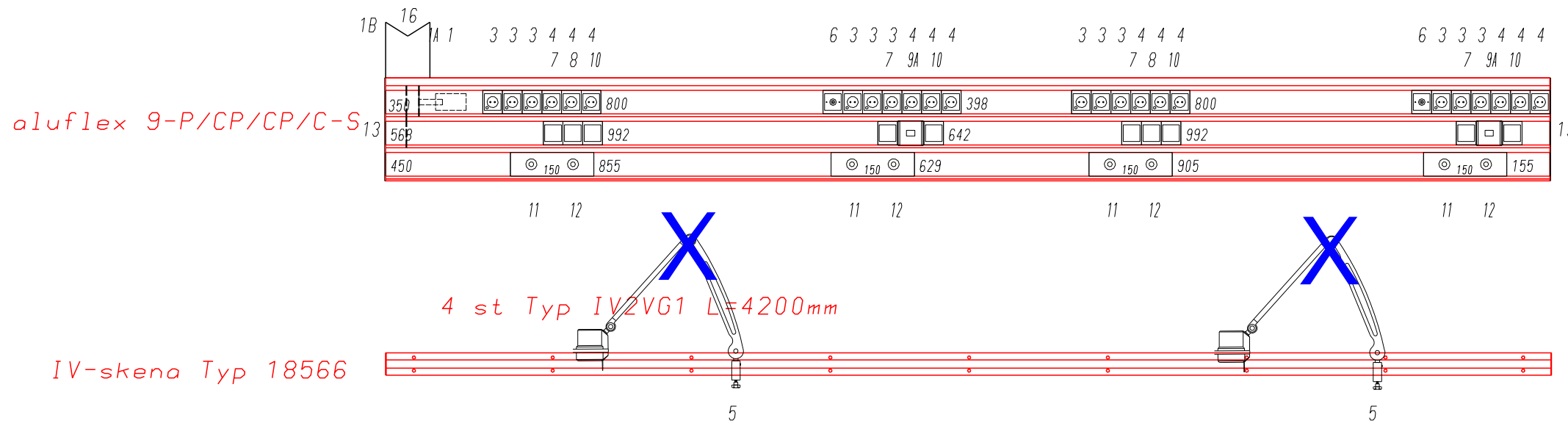

S-profil
P/C-profil
P/C-profil
P/C-profil
9-profil

Sidvy


- Gasanslutning
- Oxygen \varnothing 12mm kopparrör R90 avslutas 300mm utanför panel
 - A-Luft \varnothing 12mm kopparrör R90 avslutas 300mm utanför panel
- Elanslutning
- Kurs-1 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
 - Kurs-2 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
 - Kurs-3 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
 - Kurs-4 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
 - Ljussignal Kablage dras i egen kanal
 - Datauttag Kablage dras i egen kanal
 - KNX ansl. Kablage dras i egen kanal
 - Tomdosa Kablage dras i egen kanal

Den här handlingen får ej kopieras, delgivas, annan eller obehörigen användas. Övertäckelse beivras

SIGN. HA	SKALA 1:20	Sykeromskanal Aluflex 9 Best.nr: 18580, Vit RAL9003	FAGERHULT Fagerhults Belysning AB Tel: +46 36 108500 566 80 Hobo Sweden WWW.FAGERHULT.COM epost: HCpriceandorder@fagerhult.se
RIT.DATUM 2023-09-22	ERSÄTTER		
PLOTT.DATUM 2023-11-28	ERSÄTT AV	Rikshospitalet	2023067/10
GENERELL TOLERANS		Oslo	


Rev.	Ändring och/eller medd.-nr	Sign.	Datum
1	Ändrad bestyckning efter mail 2023-11-16	HA	2023-11-16

4 st Typ 3G1a L=2600mm (inkl.gavlar) RUM Övervakning grupp 1 rum

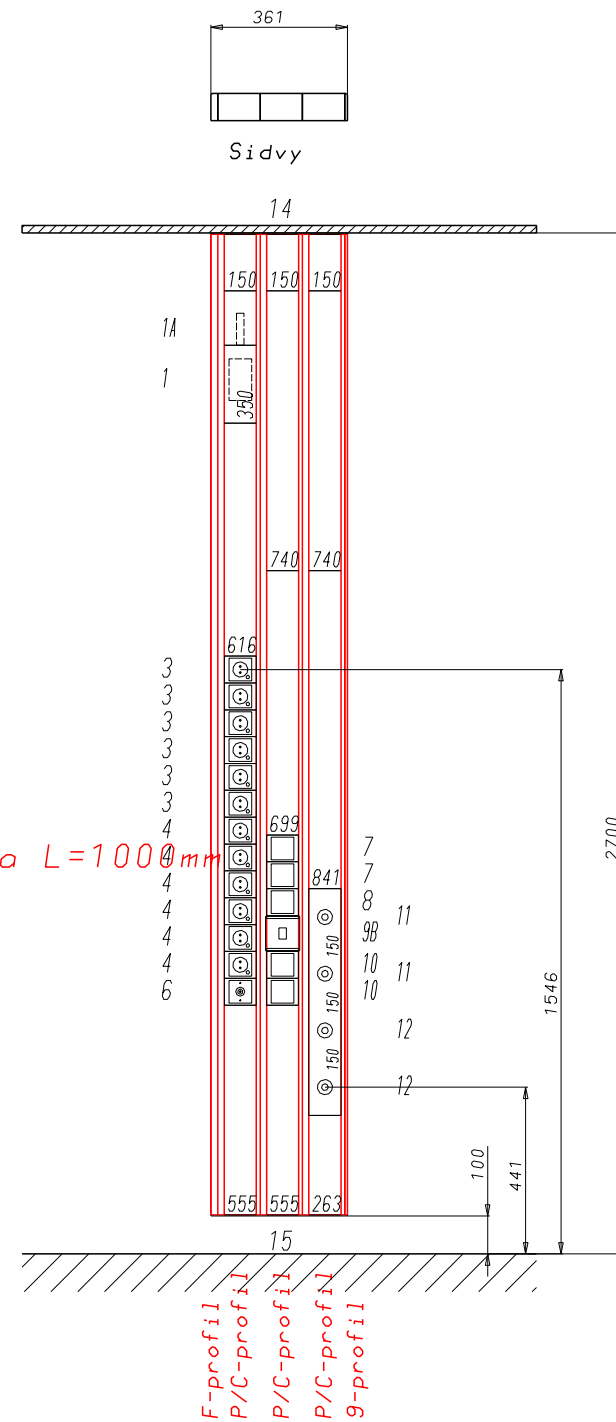

IV-skena Typ 18566

4 st Typ IV3G1a L=1000mm

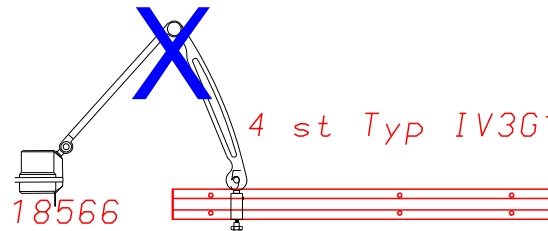

Gasanslutning

Oxygen \varnothing 12mm kopparrör R90 avslutas 300mm utanför panel
A-Luft \varnothing 12mm kopparrör R90 avslutas 300mm utanför panel

Elanslutning



Kurs-1 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
Kurs-2 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
Ljussignal Kablage i egen kanal
Datauttag Kablage i egen kanal
KNX ansl. Kablage i egen kanal
Tomdosa Kablage i egen kanal

aluflex 9-P/CP/CP/C-F

SIGN. HA	SKALA 1:20	Sykeromskanal Aluflex 9 Best.nr: 18580, Vit RAL9003	FAGERHULT Fagerhults Belysning AB Tel: +46 36 108500 566 80 Hobo Sweden WWW.FAGERHULT.COM epost: HCpriceandorder@fagerhult.se
RIT.DATUM 2023-09-23	ERSÄTTER		
PLOTT.DATUM 2023-11-28	ERSATT AV	Rikshospitalet	2023067/11
GENERELL TOLERANS		Oslo	

Den här handlingen får ej kopieras, delgivas, omges eller obehörigen användas. Överträdelse beivras

4 st Typ 3G1b L=2750mm (inkl.gavlar) RUM Övervakning grupp 1 rum

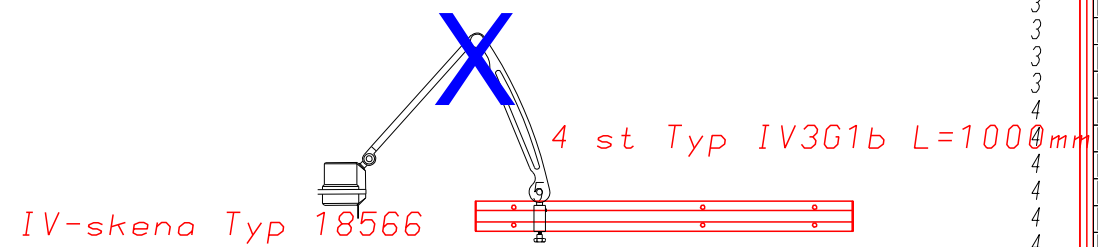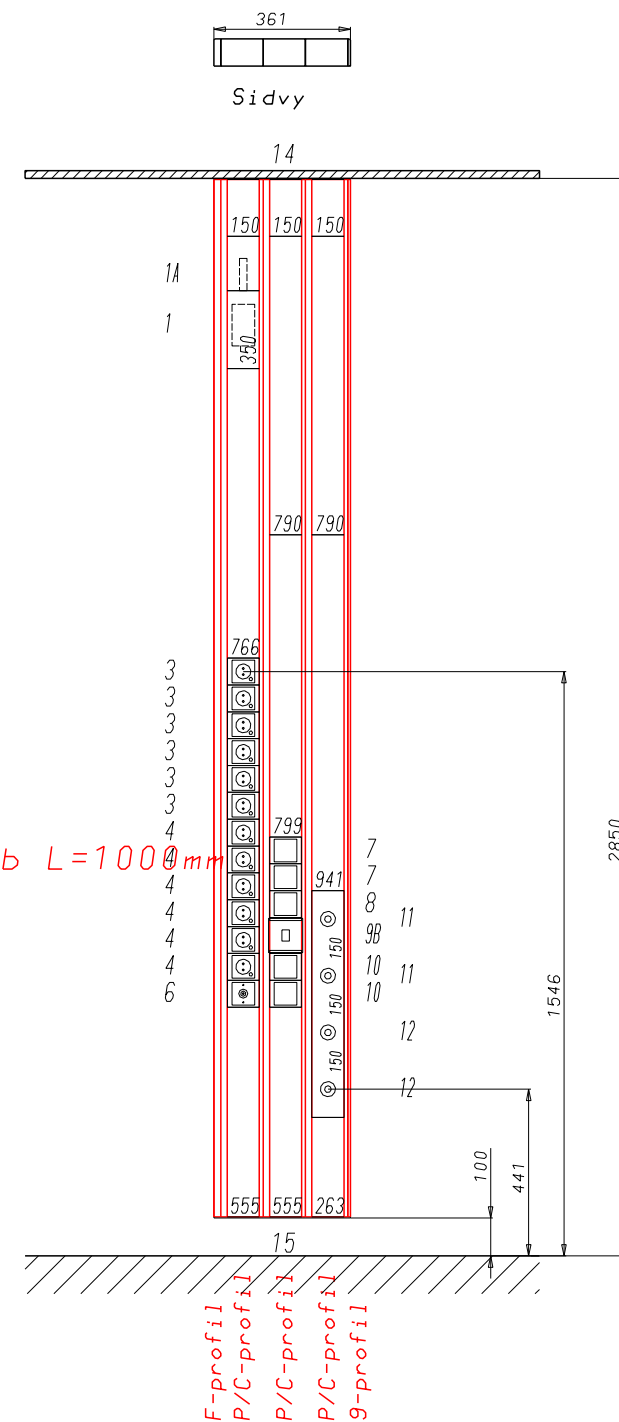

Gasanslutning

- Oxygen \varnothing 12mm kopparrör R90 avslutas 300mm utanför panel
- A-Luft \varnothing 12mm kopparrör R90 avslutas 300mm utanför panel

Elanslutning

- Kurs-1 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
- Kurs-2 1-fas 230V/16A, plint WAGO 862 0,5-4mm
- Ljussignal Kablage i egen kanal
- Datauttag Kablage i egen kanal
- KNX ansl. Kablage i egen kanal
- Tomdosa Kablage i egen kanal

aluflex 9-P/CP/CP/C-F

SIGN. HA	SKALA 1:20
RIT.DATUM 2023-09-23	ERSÄTTER
PLOTT.DATUM 2023-11-28	ERSÄTT AV
GENERELL TOLERANS	

Sykeromskanal Aluflex 9
Best.nr: 18580, Vit RAL9003
Rikshospitalet
Oslo

FAGERHULT
 Fagerhults Belysning AB Tel: +46 36 108500
 566 80 Hobo Sweden WWW.FAGERHULT.COM
 epost: HCpriceandorder@fagerhult.se

2023067/12